



::Bones

Milestone 312 Ace

Manual

www.bones.ch

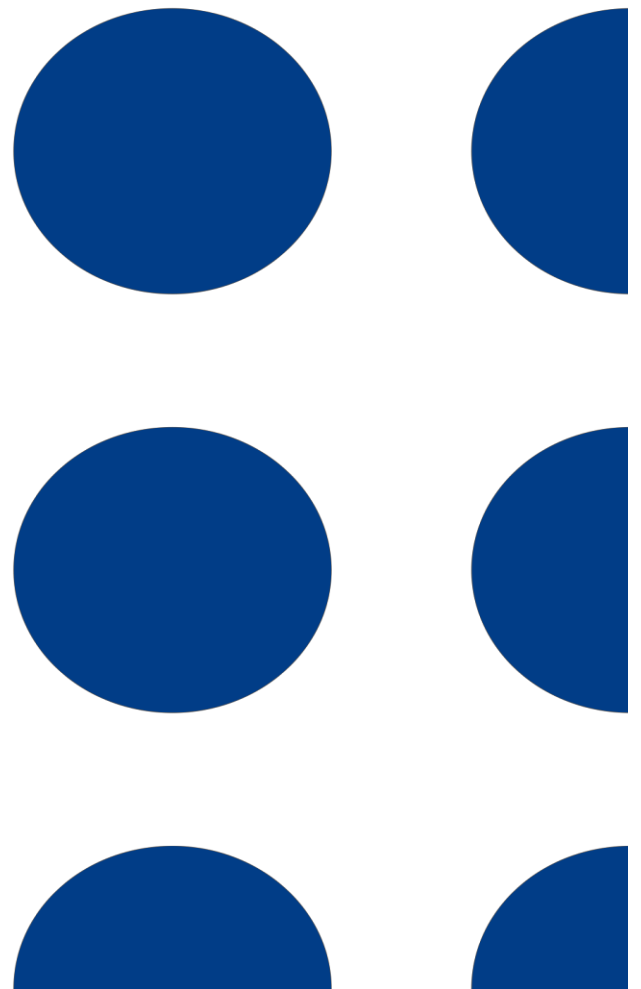

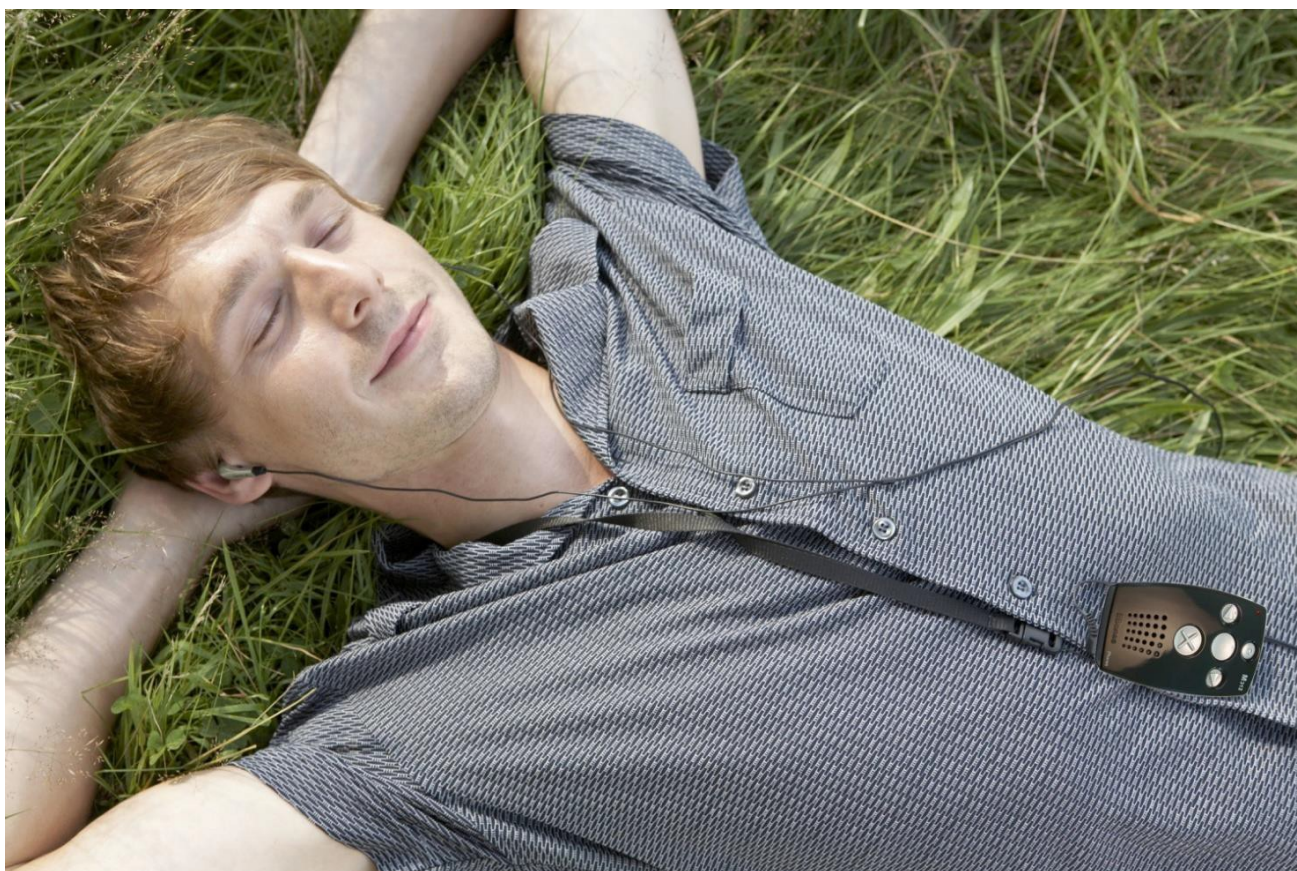

Milestone 312 Ace.

Milestone 312 Ace är en högpresterande enhet i minsta möjliga utformning. Vi jämför den ofta med en annan typisk schweizisk produkt. Nej, inte choklad, men väl den schweiziska armékniven. Milestone 312 Ace är liten och portabel, multifunktionell och pålitlig.

Milestone 312 Ace är speciellt framtagen för synskadade och blinda personer för att underlätta planering och hantering både yrkesmässigt och i det privata livet. Den kan anpassas efter varje användares behov. Du kan skapa ett enkelt användbart hjälpmedel med några standardegenskaper eller så kan du skapa en fullt utrustad enhet med alla möjliga tänkbara tekniska finesser.

I manualen finns några illustrationer, de är avsedda för en eventuell seende person som hjälper dig lära känna din Milestone. Men illustrationerna är inte alls oumbärliga, utan bara en extra hjälp.

Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska – eller senare upplagor av den – kan du gå in på hemsidan www.bones.ch. Dessutom finns manualen i din spelares interna minne och då i txt-format.

Vi hoppas att du får stor glädje och nytta av din Milestone 312 Ace!.

1. Produktöversikt	6
1.1 Egenskaper i Milestone 312 Ace	6
1.1.1. Standardfunktioner	6
Funktion.....	6
Beskrivning	6
1.1.2. Extra programvara	7
Funktion.....	7
Beskrivning	7
1.1.3. Extra utrustning (Add-Ons).....	7
1.2. Förpackningens innehåll	7
2.1. Illustration av Milestone 312 Ace	8
2.2. Beskrivning av utsida	8
2.2.1. Ovansidan	8
2.2.2. Bortre kortsidan	9
2.2.3. Främre kortsidan	9
2.2.4. Högra långsidan	9
2.3. Använda gränssnitten	9
2.3.1. Laddning av batteriet	9
2.3.2. Anslut hörlurar	9
2.3.3. USB-anslutning till dator	9
2.3.4. Extern mikrofon och linjeingång	10
2.3.5. SD-minneskortet	10
3. Vanlig användning	10
3.1. Grundläggande funktioner	10
3.1.1 Välj standardfunktion	10
3.1.2. På / Av (viloläge)	10
3.1.3. Knapplåset	11
3.1.4. Volymkontroll	11
3.1.5. Läsastighet	11
3.1.6. Meny	11
3.1.6.1. Informationslista	12
3.1.6.2. Tillgängliga inställningar	12
3.1.6.3. Grundinställningar	12
3.1.7. Lista över genvägar för grundläggande funktioner	13
3.2. Arbeta med Milestone via dator	13
3.2.1. M312A enheter via dator	13
3.2.2. Skapa en mappstruktur via dator	13
3.2.3. Överföra eller radera filer via dator	14
3.2.3.1 Överföring via dator	14
Extrahera CD's till din dator innan kopiering till M312 Ace:	14
Lagra varje bok i en egen mapp:.....	14
3.2.3.1. Radera filer och mappar via dator	14
4. Standardfunktioner	15
4.1 Audio	15
4.1.1. Grundläggande funktioner i Audio	15
4.1.1.1. Navigera mellan mappar	15

4.1.1.2. Radering av filer och mappar i Milestone 312 Ace.....	16
4.1.1.3. Skapa genväg till en mappar.....	16
4.1.1.4. Röstanmne mappar	16
4.1.1.5. Snabbhopp.....	17
4.1.1.6. Skapa och radera Audiomärke	17
4.1.2. Spela upp musik	18
Format	18
Beskrivning	18
4.1.3. Lyssna på textfil.....	18
Format	19
Beskrivning	19
4.1.4. Fickminnet	19
4.1.4.1. Spela in kortare röstanteckning.....	19
4.1.4.2. Spela in röstanteckning kontinuerligt.....	19
4.1.4.3. Sparade röstanteckningar.....	20
4.1.5. Radiosändning - skicka trådlöst till en vanlig radiomottagare	21
4.1.6. Lista över genvägar i Audio	21
4.2. Böcker - Daisyspelare	22
4.2.1. Spela upp och pausa i en bok	23
4.2.2. Navigera i en bok	23
4.2.3. Välj bok	24
4.2.4. Lägga in eller radera bokmärke.....	24
4.2.5 Radiosändning - Skicka trådlöst.....	25
4.2.6. Lista över genvägar i Daisyspelaren (Böcker).....	25
4.3. Alarm	25
4.3.1. Att ställa in ett larm.....	25
4.3.2. Stänga av alarmer	26
4.3.3. För tid och datum	26
4.3.4. Ställa in tid och datum	26
4.3.5. Lista över genvägar i Alarm.....	26
5. Extrafunktioner.....	27
5.1. Radio.....	27
5.1.1. Lyssna på radio.....	27
5.1.2. Sökning av kanal via frekvens.....	27
5.1.3. Spara och döpa en radiokanal	27
5.1.4. Spela in radioprogram.....	28
5.1.5. Radiosändning.....	28
5.1.6. Lista över genvägar i Radio	28
5.2. Agenda	28
5.2.1. Information om aktuell dag och tid	29
5.2.2. Att skapa och hantera aktiviteter.....	29
5.2.3. Förhandsgranska och skapa en aktivitet	31
5.2.4. Radera en aktivitet.....	31
5.2.5. Stoppa påminnelse	31
5.2.6. Exempel på skapande av aktiviteter.....	31

5.2.7. Lista över genvägar i Agenda	31
6. Mer information	32
6.1. Tekniska data.....	32
6.2. Goda råd	33
6.2.1. SD-minneskort	33
6.2.1.1. Rekommenderade fabrikat för M312 Ace	33
6.2.1.2. Skydda innehållet på ett SD-minneskort	33
6.2.3. Skydda din Milestone	33
6.2.4. Skapa en säkerhetskopia	33
6.2.5. Ingenting fungerar längre - felsökning	33
6.3. Service och support.....	34
6.3.1. Allmän information	34
6.3.2. Programuppdateringar	34
6.4. Om Bones	34

1. Produktöversikt

Detta kapitel introducerar alla egenskaper i Milestone 312 Ace. Dessutom får du en förteckning över innehållet i den här försändelsen.

1.1 Egenskaper i Milestone 312 Ace

Milestone 312 Ace (M312A) är en flerfunktionsapparat som kan skräddarsys efter dina önskemål. Redan i standardutförandet har Milestone många funktioner. Men det finns ytterligare applikationer som kan köpas och aktiveras vid behov.

1.1.1. Standardfunktioner

Här är en lista med funktioner som finns med när du köper en standardversion av M312A.

Funktion	Beskrivning
Audio	Audio är en multifunktionsapplikation med följande bredd av funktioner: Musikspelaren: Du kan lyssna på musik med hög ljudkvalitet. Den känner igen de olika formaten MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, M4V och MP4 och spelar automatiskt upp vald fil. Talsyntes: Med hjälp av denna kan du läsa textfiler i DOC- och TXT-format. Du kan välja mellan flera olika språk och röster. Fickminnet: Tydliga, proffsiga röstinspelningar, även i bullriga miljöer såsom tåg och flygplan, är Milestones specialitet. Med den inbyggda högtalaren får du en enastående ljudåtergivning för portabla spelare. Du kan även ansluta en extern mikrofon och spara högkvalitetsinspelningar i stereo. Radiosändning: med denna funktion kan du trådlöst sända tal- eller musik via VHF till en hem- eller bilradiomottagare, båda enheter behöver samma FM-frekvens. Spela ljudböcker, musik, textfiler eller egna inspelningar. I Audio kan du variera uppspelningshastigheten på alla typer av filer. Och du kan spara och organisera filer och mappar fritt, precis som i din dator.
Böcker	Böcker är en spelare för Daisyböcker och andra typer av elektroniska böcker med inbyggd struktur. Den ger tillgång till alla befintliga navigationsalternativ, varierar läshastigheten, sätter bokmärken med mera. Med FM-sändaren kan du också lyssna på böcker via bilradio eller i din egen hemstereo.
Alarm	Alarm är en lättanvänd väckarklocka med alla nödvändiga inställningsmöjligheter, olika väckningsljud och vibrationsalarm. Du kan få information om aktuell tid och dagens datum. Den har även en timer och stoppur.

1.1.2. Extra programvara

Följande extrafunktioner kan beställas och installeras i Milestone för att utöka dess egenskaper efter användarens behov.

Funktion	Beskrivning
Radio	Med stereoradions FM-mottagare kan du automatiskt söka och lagra radiokanaler, mata in frekvenser, göra inspelningar och RDS (radio data system)
Agenda	Agenda är en effektiv kalender för att hjälpa dig organisera ditt dagliga liv. Förutom vanliga kalenderfunktioner, kan Agenda användas vid speciella händelser som att spela in ett radioprogram eller en röstinspelning vid en bestämd tidpunkt.

1.1.3. Extra utrustning (Add-Ons)

Med extra utrustning (add-on) får du funktioner du normalt bara får genom ytterligare en fristående specialprodukt. De är utformade för att smidigt sammanfogas med din M312A. Tryck helt enkelt ihop dem och börja använda den nya funktionen.

Ett exempel på en Add-on är Fame. Med denna högkvalitativa optiska färgindikatorn kan du identifiera färger. Du kan känna igen färger på kläder i din garderob för att sedan matcha de plagg du vill använda. Utöver färgigenkänning och jämförelse av färger, kan Fame också indikera ljusstyrka.

Ytterligare exempel på extrautrustning är streckkodsläsaren Woodscan.

För ytterligare information om extra programvaror och extrautrustning, kontakta din återförsäljare eller gå in på hemsidan www.bones.ch.

1.2. Förpackningens innehåll

I din kartong ska följande föremål finnas:


- *Milestone 312 Ace*
- *USB 2.0-kabel*
- *Laddningskabel*
- *Halsrem*
- *Fodral*
- *SD-minneskort*
- *Manual*

Om någon av dessa saknas i din försändelse, kontakta din återförsäljare.

2. M312 Ace utsida

Det här kapitlet förklarar spelarens utsida, med knappar, anslutningar, kontakter och andra kännbara delar.

2.1. Illustration av Milestone 312 Ace

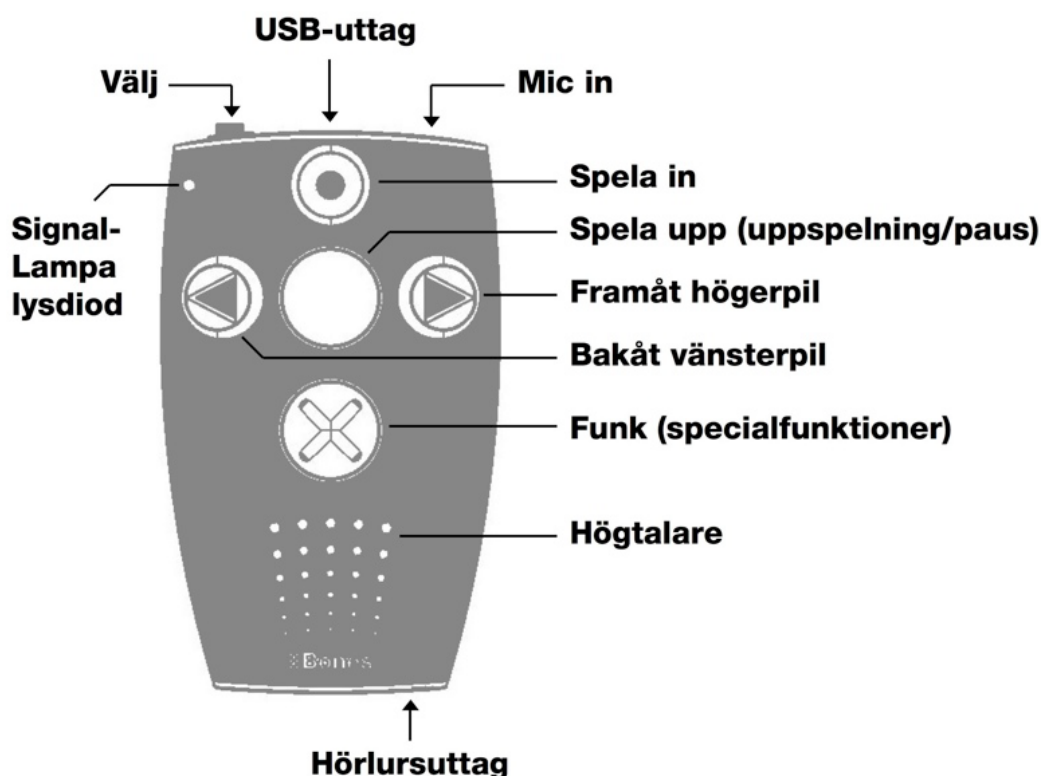

2.2. Beskrivning av utsida

2.2.1. Ovansidan

Håll apparaten så att du har kortsidan mot dig och knapparna från dig. I mitten finns en större rund knapp och fyra andra knappar runt den som formen av ett kors.

Den översta knappen, den som sitter längst bort, kallas Spela in. Den har en rund symbol.

Den mittersta knappen är Spela upp. Den saknar symbol och är slät.

Till vänster om Spela upp hittar du Bakåt/Vänsterpil. Den har en symbol som en vänsterpil.

Till höger om Spela upp finns "framåt/högerpil" med en symbol som en högerpil.

Den nedersta knappen, den närmast dig, kallas "funk" och är lika stor som Spela upp. Den har ett kors/kryss som symbol.

Alla symboler är taktila.

Nedanför knapparna hittar du också högtalaren, som består av flera små hål, närmast dig. I det övre vänstra hörnet på ovansidan sitter en liten lysdiod med rött sken.

De fyra knapparna, som är placerade runt Spela upp-knappen, används ofta som ett navigeringskors. Med "Vänsterpil" navigerar du till vänster, med "Högerpil" till höger, den övre Spela in-knappen tar dig till upp i nivå och med den nedre Funk-knappen flyttar du neråt.

2.2.2. Bortre kortsidan

På den bortre kortsidan hittar du en utstående liten knapp längst till vänster. Den kallas Välj. Till höger om Välj hittar du uttaget för USB-kabeln och laddaren. Förutom att överföra data till och från en dator, kan du använda USB-kabeln för att ladda enhetens batteri. Längst till höger hittar du en liten rund kontakt. Den är till för externa mikrofoner och är även en linjeingång.

2.2.3. Främre kortsidan

På framsidan, kortsidan emot dig, hittar du enbart hörlursuttaget längst till höger.

2.2.4. Högra långsidan

På den högra långsidan finns en springa för ett SD-minneskort.

2.3. Använda gränssnitten

M312A har flera ingångar för anslutning av kringutrustning som hörlurar, externa mikrofoner och SD-kort. Följande beskrivningar ger dig en översikt över alla dessa och dess användningsområden.

2.3.1. Laddning av batteriet

Anslut den medföljande laddningskabeln till ett vägguttag. Anslut den andra änden till mini-USB-anslutningen på M312A som finns i mitten av spelarens bortre kortsida. En djup signal bekräftar att anslutningen gjorts rätt och lysdioden, på spelarens ovansida, blinkar med tre sekunders mellanrum. Maximal laddningstid är 3 timmar. Du kan kontrollera laddningsnivån via Informationslistan i Menyn. Läs mer i tillhörande avsnitt.

Notera att spelarens batteri laddas även när den är ansluten till dator, så länge datorn är igång.

M312A har ett kraftfullt, laddningsbart litiumbatteri, som håller flera veckor i standby och räcker upp till 20 timmars användning. Maximal uppspelningstid får du genom att lyssna på musik och böcker via hörlurar, på medelhög volym och med normal läshastighet. Tänk på att den inbyggda högtalaren drar mer batteri och minskar därmed speltid. Detsamma gäller för höga läshastigheter, hög volym och läsning av textfiler.

2.3.2. Anslut hörlurar

Om du inte vill lyssna via högtalaren, koppla in vilka hörlurar som helst som har en 3.5 mm-kontakt, som sitter längst till höger på kortsidan emot dig. Högtalaren kopplas då ifrån och ljudet går ut i hörlurarna.

Observera att din Milestone 312 Ace har två oberoende volymer - en för den inbyggda högtalaren och en för hörlurarna.

2.3.3. USB-anslutning till dator

Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta din M312A till dator. Sätt i den mindre kontakten i spelarens mini-USB-anslutning, som sitter i mitten på den bortre kortsidan. Den större kontakten är en standard-USB och sätts i datorns USB-anslutning. Spelaren meddelar "Anslutning till dator" när förbindelsen är upprättad och enheten visas som "M312ACE" i din dator. Nu kan du överföra filer som böcker, musikfiler, röstmeddelanden, textfiler och annat. Även stora datamängder går snabbt att överföra tack

vare den snabba USB 2.0 Hi-Speedporten. När du är klar, använd säker borttagning som vilken annan vanlig USB-anslutning när du kopplar ifrån enheten.

Tips: Säkerhetskopiera din M312A regelbundet så att du slipper förlora eventuella data.

Observera: Knappsatsen på M312 är låst när spelaren är ansluten via USB

2.3.4. Extern mikrofon och linjeingång

Längst till höger på den borte kortsidan hittar du en liten rund kontakt. Det är en 3,5 mm anslutning och är en linjeingång för 3,5 mm stereoljudkablar eller för att ansluta en extern mikrofon. Mer information hittar du i avsnittet "Fickminnet".

2.3.5. SD-minneskortet

Din M312 Ace har ett internt minne på 12 gigabyte. Med SD- eller SDHC-minneskort kan du utöka minneskapaciteten för att lagra fler böcker, musik, röstanteckningar och andra filer. Du kan använda MMC, SD- och SDHC-minneskort upp till 32 gigabyte. Minneskortet sätts in till höger, i en lång springa på Milestone högra långsida. Tryck in det tills du känner att det låsts fast. När du vill ta ut kortet trycker du bara in det en liten bit och då märker du att det lossnar och bara är att dra ut.

Korten har olika minnesstorlek och finns i flera olika fabrikat. Vi rekommenderar minneskort från SanDisk, Kingston, Transcend eller Toshiba.

Observera: Om det är svårt att sätta i kortet, se till att kolla att rätt sida sätts in. Kortet har en räfflad sida, det är kontakterna. Ett av kortets hörn är avfasat. När du sätter in kortet, se till att den räfflade sidan är först in mot springan och det avfasade hörnet uppåt ifrån dig.

Tips: Säkerhetskopiera dina personliga filer till ett SD-kort eller dator lite nu och då för att undvika förlust av eventuella data om din spelare skadas.

Varning: Använd inte SDXC minneskort då dessa vanligtvis är för stora, från 64GB och uppåt.

3. Vanlig användning

Detta kapitel innehåller den generella användningen av M312A och förklarar även hur spelaren används tillsammans med dator.

3.1. Grundläggande funktioner

Följande knappbeskrivningar används för att ändra tillgänglig, globala inställningar och funktioner. De kan göras oavsett vilken egenskap som är vald.

3.1.1 Välj standardfunktion

Med Välj -knappen hör du vilka tillgängliga funktioner din M312A har. Varje gång du trycker på knappen sägs funktionens namn. Standard är "Audio", "Böcker" och "Alarm". "Radio" och "Agenda" kan köpas till.

3.1.2. På / Av (viloläge)

Milestone har ingen fysisk strömbrytare. Tryck på vilken knapp som helst om du vill starta din spelare. Efter 10 minuters inaktivitet går Milestone in i viloläge för att spara batteri. Om du trycker på någon knapp så vaknar spelaren och återgår till den senast använda egenskapen och position.

Tips: Om Milestone inte "vaknar" när du trycker på en knapp, kan det finnas tre anledningar att kontrollera: Knapplåset kan vara på (den allra vanligaste), volymen kan vara på lägsta nivån eller batteriet kan vara urladdat.

3.1.3. Knapplåset

För att undvika oönskade knapptryckningar använd knapplåset. När det är på reagerar spelaren inte på några knapptryckningar förutom den som avaktiverar det. För att aktivera knapplåset, tryck och håll inne Funk och tryck därefter på Spela in. Släpp knapparna och spelaren bekräftar "Knapplås på". För att stänga av knapplåset, använd samma knappkombination igen och du hör meddelandet "Knapplås på".

3.1.4. Volymkontroll

För att öka volymen en nivå, tryck och håll inne "Funk" och tryck en gång kort på "Högerpil", spelaren bekräftar med "Högre". Om du vill sänka volymen, tryck och håll inne "Funk" och tryck en gång kort på "Vänsterpil", spelaren bekräftar med "Lägre". Vill du ändra volymen mer än så, tryck och håll inne "Funk" och tryck sedan flera gånger på pilknappen. Om du ändrar volymen under uppspelning hör du enbart volymen öka eller minska. Ändrar du volymen när spelaren är pausad får du meddelandet "Högre" eller "Lägre". När du når högsta eller lägsta nivå hörs en dov signal.

3.1.5. Läshastighet

För att öka läshastigheten med en nivå (10%), tryck och håll inne Välj och tryck en gång kort på "Högerpil". För att minska läshastigheten, tryck och håll inne Välj och tryck en gång kort på "Vänsterpil". Ändring läshastighet kan bara ske under uppspelning av fil. Läshastighetens räckvidd sträcker sig från 50% (halverad hastighet) till 200% (fördubblad hastighet), en dov, kort signal meddelar normal hastighet. Ytterligare val av hastighet kan väljas via Menyn.


3.1.6. Meny

Menyn innehåller information för vald funktion och ger dig tillgång till och möjlighet att ändra flera inställningar. Den bygger på tre parallella listor, "Informationslista", "Tillgängliga inställningar" samt "Grundläggande inställningar".

För att öppna Menyn, tryck och håll inne Funk i ca 2 sekunder. Först kommer du till informationslistan som innehåller relevant information om aktuell funktion.

För att komma till nästa lista som är Tillgängliga inställningar, tryck på Högerpil. Om du trycker på Högerpil en gång till kommer du till Grundinställningar. Tryck på Vänsterpil om du vill gå tillbaka.

Att navigera i Meny är rätt enkelt. Tänk dig de fyra knapparna runt Spela upp som ett navigeringskors. Spela in är "uppåt" i aktuell nivå och Funk är "nedåt" i densamma. Med pilknapparna flyttar du dig horisontellt. För att avsluta Meny, tryck bara på Välj eller vänta 10 sekunder. Det är så lång tid det dröjer innan spelaren automatiskt lämnar Meny-läget.

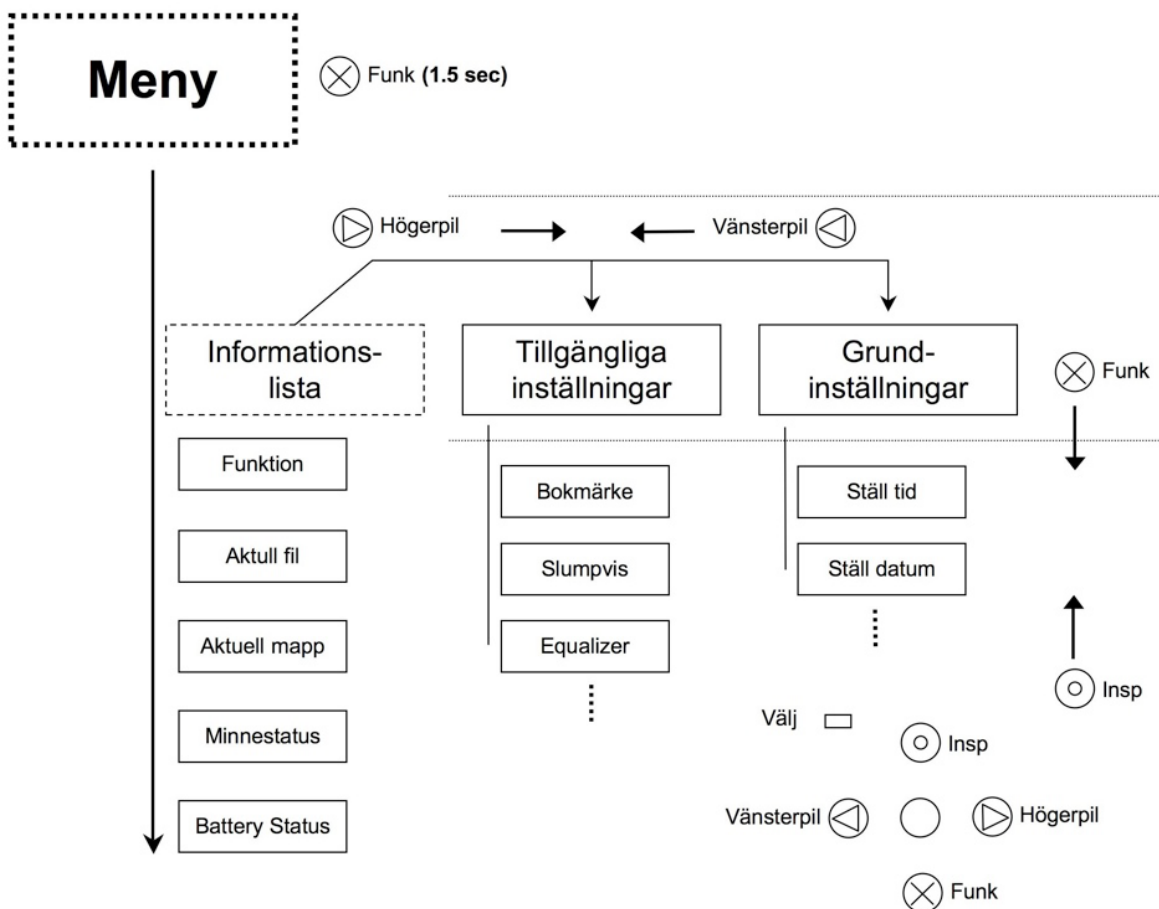

3.1.6.1. Informationslista

Tryck och håll inne Funk i ca 2 sekunder för att "Informationslistan". Den innehåller information om aktuell funktion och meddelar batteristatus. Funktionerna har olika egenskaper och därför ser innehållet Informationslistan olika ut beroende på vald funktion. Om du vill upprepa senaste informationen tryck på Spela in för att gå uppåt eller tryck på "Funk" för att gå nedåt. För att avsluta, trycka bara på Välj eller vänta ut uppläsningen av hela informationslistan.

3.1.6.2. Tillgängliga inställningar

I "Tillgängliga inställningar" (andra listan i Meny) kan du ändra inställningar i aktuell funktion. Men precis som med "Informationslistan" varierar egenskaperna beroende på vilken funktion som är vald. Om du t ex befinner dig i Audio kan du välja Slumpvis uppspelning, läshastighet för text med mera.

Du går nedåt i listan med inställningar med "Funk" till den tar slut. Gå uppåt igen med Spela in. När du kommit till en inställning du vill ändra, tryck på "Vänster- eller Högerpil" för att välja mellan de olika alternativen. Valet sparas automatiskt. För att avsluta, tryck bara på Välj.

3.1.6.3. Grundinställningar

I "Grundinställningar" (tredje listan i Meny) kan du lyssna av eller ändra inställningar som är generella för hela spelaren, oavsett vilken funktion som är aktuell. Till exempel att ställa klockan och dagens datum samt att ändra hastigheten för alla ledtexter.

Förflyttning i listan görs på samma sätt som tidigare, nedåt med "Funk" till den tar slut och uppåt igen med Spela in. När du kommit till en inställning du vill ändra, tryck på "Vänster- eller Högerpil" för att välja mellan de olika alternativen. Valet sparas automatiskt. För att avsluta, tryck bara på Välj.

Observera: Du kan göra mer avancerade ändringar via dator genom att konfigurera en fil i det interna minnet i din spelare. Läs mer om det i avsnittet "Anpassa Milestone via dator – CONFIG MILESTONE.TXT" längre fram i manualen.

3.1.7. Lista över genvägar för grundläggande funktioner

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Sätt på M312A	Tryck på valfri knapp	Funktion
Välj funktion	Välj	Funktion
Öka volym	"Funk" + "Högerpil"	"Högre" (i pausläge)
Sänka volym	"Funk" + "Vänsterpil"	"Lägre" (i pausläge)
Ändra läshastighet (under uppspelning)	Välj + "Höger-" eller "Vänsterpil"	Ingen. Hastigheten ändras helt enkelt.
Aktivera knapplåset	"Funk" + Spela in	"Knapplås på"
Låsa upp knapplåset	"Funk" + Spela in	"Knapplås av"
Öppna Meny	"Funk" i ca 2 sekunder	Informationlistan startar

3.2. Arbeta med Milestone via dator

Innan du kan lyssna på musik, textfiler eller digitala böcker, måste du kopiera innehållet till din Milestones externa SD-minneskort eller interna minne. Du kan överföra filerna från din dator via den medföljande USB-kabeln och skapa din egen mappstruktur för att organisera dina filer. Det finns inga begränsningar på fil- eller mappnamn.

3.2.1. M312A enheter via dator

Anslut din Milestone till datorn via den bifogade USB-kabeln enligt beskrivningen i avsnittet "USB-kontakten för datoranslutning" i denna manual. Milestones enheter visas som flyttbar disk i din dator på samma sätt som ett USB-minne. Den ena heter "M312ACE", och är omfattande interna minnet på 12 GB.

Om ännu en enhet visas, är det ett externt SD-minneskort som är insatt i spelaren. Det visas som "Flyttbar disk" men bara om ett SD-kort verkligen sitter i spelaren.

När du är klar med dina överföringar, koppla ifrån spelare och minneskort från dator på korrekt sätt, t ex med säker borttagning av enhet.


3.2.2. Skapa en mappstruktur via dator

Du kan skapa en struktur med mappar och undermappar för att ordna dina filer. Antingen direkt i det interna minnet eller på det externa minneskort du använder till din Milestone.

M312 har inga begränsningar för hur du döper dina mappar eller bygger din struktur.

Notera att det sannolikt redan finns ett antal namngivna mappar i det interna minnet. De är ett förslag på hur en mappstruktur kan se ut och kan antingen raderas eller döpas om efter behov. Via dator kan du skapa, namnge, flytta eller radera mappar allt eftersom innehållet ändras.

Här visas en illustration som ett exempel på en mappstruktur.

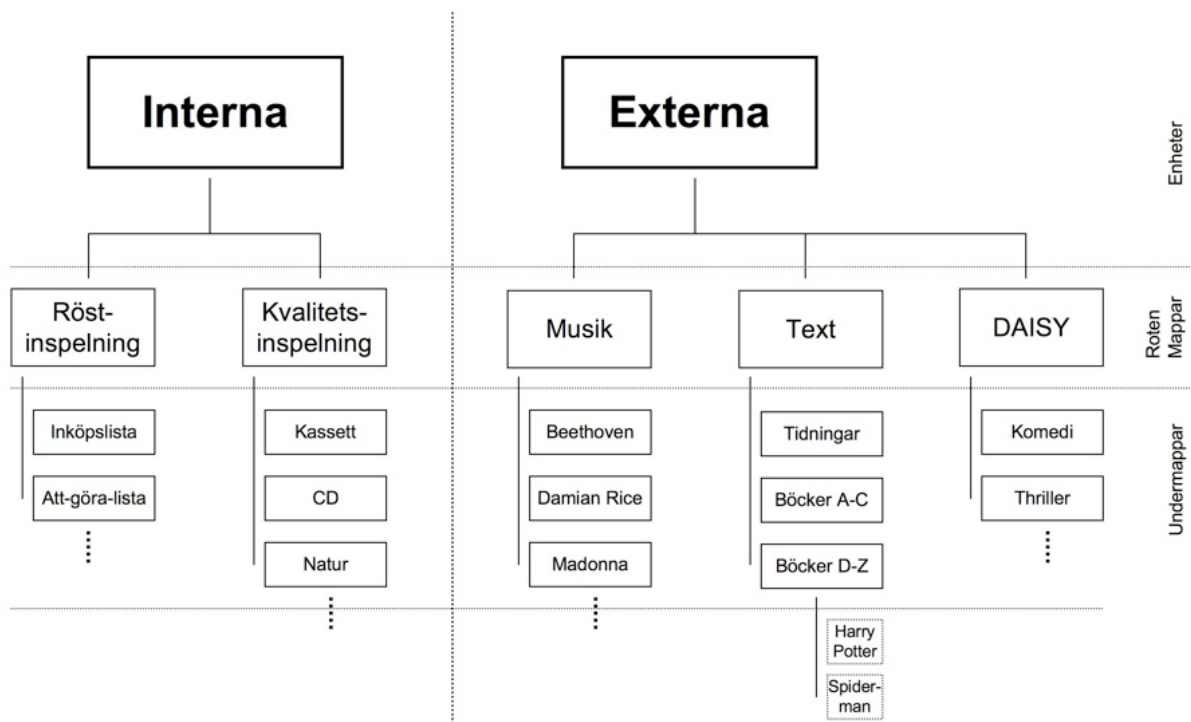

Observera: Vissa funktioner skapar automatiskt sin egen mapp, t ex radion skapar mappen "Radio" och lista över radiostationer.

3.2.3. Överföra eller radera filer via dator

3.2.3.1 Överföring via dator

Du kan överföra många olika filer till din Milestone. Till exempel text-, musik-, ljudboks- och talboksfiler. Kopiera bara aktuell fil från din dator och klistra in den i önskad mapp eller direkt i rotkatalogen. Se till att ha tillräckligt lagringsutrymme på ditt SD-minneskort eller det interna minnet, så att det i varje fall räcker för det du vill klistra in.

Extrahera CD's till din dator innan kopiering till M312 Ace:

I funktionen "Audio" kan ljudformaten MP3, AAC, WMA, WAV, MP4, M4A, M4V samt textfilerna TXT och DOC spelas. Dessa filer kan kopieras direkt till M312A. Däremot måste ett kommersiellt CD-album först konverteras till något av ovan nämnda format innan de kan spelas. När du sätter in en musik-CD i dator är filerna i ett format som M312A inte kan spela direkt. Använd därför program som CDex, Windows Media Player eller iTunes för att extrahera filerna till ett för Milestone användbart format. Nämnda program konverterar musikspåren till mindre, universellt användbara format.

Lagra varje bok i en egen mapp:

I funktionen "Böcker" kan du läsa böcker i formaten DAISY 2, DAISY 3, EPUB, Audible AA och AAX. Spara varje bok i en egen separat mapp. Det är en förutsättning för att kunna ta del av talbokens struktur och gör det lättare för dig att hålla ordning på dina böcker.

3.2.3.1. Radera filer och mappar via dator

Du kan radera filer och mappar i din M312A men oftast är det snabbare gjort via anslutning till dator. Framförallt om det är mycket du vill ta bort. Använd datorns vanliga sätt att radera filer och mappar från spelaren, som från vilken annan enhet som helst.

Observera: Om du raderar filer i din M312A via en Mac, se till att tömma papperskorgen när

du är klar. Annars tar du bara bort länkarna inte själva filerna ifråga. När du är färdig, koppla ifrån M312A från dator på korrekt sätt, t ex med säker borttagning av enhet.

4. Standardfunktioner

Det här kapitlet beskriver hur du använder de tre standardfunktionerna i M312A. "Audio", "Böcker och "Alarm". "Audio" – den första och mest omfattande funktionen – innehåller musikspelare, textläsning med talsyntes och inspelning (t ex röstanteckningar). Den andra funktionen "Böcker", är en bokspelare som läser formaten Daisy, Audible, EPUB, NLS samt BookShare. Den tredje är "Alarm" och är lättanvänd väckarklocka som hjälper dig att komma upp om mornarna men den har också en timer och tidtagarur.

4.1 Audio

"Audio" är flerfunktionell med uppspelning, läsning och inspelningsmöjligheter, kompatibel med än mängd olika användbara format. Här kan du lyssna till dina musiksamlingar eller använda den inbyggda talsyntesen för att läsa textfiler du kopierat till din spelare. Utöver uppspelning så har "Audio" också en behändig högkvalitativ inspelningsfunktion. Du kan läsa in egna röstanteckningar via den inbyggda mikrofonen eller så kan du anpassa inspelningar från konserter, möten eller liknande genom att använda en extern mikrofon. Alla filer som används i "Audio" kan ordnas i mappar precis som i en dator. Strukturen kan göras i förväg i dator via en USB-anslutning.

4.1.1. Grundläggande funktioner i Audio

Följande grundläggande funktioner finns i "Audio". För att komma dit, tryck på Välj tills du hör "Audio".

4.1.1.1. Navigera mellan mappar

Med Audio navigerar du fritt mellan mappar som i datorns filhanterare, likadant i både det interna minnet och på SD-minneskortet. Det gör du med hjälp av knapparna i navigeringskorset, de fyra knapparna runt Spela upp-knappen vi beskrivit tidigare i manualen: Spela in är "uppåt" i mappnivå och "Funk" är "nedåt", så den vertikala navigeringen gör du med dem. Med pilknapparna flyttar du dig horisontellt.

Exempel: Anta att du har satt in ett externt minneskort som har två mappar, "Musik" och "Text". I mappen "Musik" finns undermapparna "Rock", "Pop" och "Klassiskt" och i mappen "Text" finns "Dagstidningar" och "Kärlekshistorier".

När din Milestone är på och du befinner dig i funktionen Audio trycker du på Spela in tills du hör ett kort pip; nu säger Milestone antingen "Interna minnet" eller "Externt minneskort". Enheten "Interna minnet" är det inbyggda minnet på 12GB och "Externt minneskort" refererar till SD-minneskortet som du sätter in i spelaren.

Du växlar mellan de två enheterna genom att trycka på Spela in. Om du befinner dig i det interna minnet och trycker på Spela in kommer du till SD-minneskortets rotkatalog. Med pilknapparna förflyttar du dig mellan filer och mappar. I det här exemplet hittar du mapparna "Musik" och "Text". Välj "Text" och tryck på "Funk" för att öppna mappen. En tonsekvens "hög-låg" hörs, den talar om att du öppnat en mapp och därmed flyttat ett steg nedåt i nivå. Milestone läser namnet på den första mappen, i det här exemplet "Dagstidningar" eftersom den läser i bokstavsordning. Låt säga att vi vill läsa en textfil i mappen "Dagstidningar", tryck

bara på "Funk" för att öppna mappen. Använd pilknapparna för att välja ut rätt textfil och tryck sedan på Spela upp för att börja uppspelning som påbörjas automatiskt.

Tips: Om du har ett stort antal filer eller mappar i en rotkatalog kan du förflytta dig till den första eller sista filen eller mappen därinom. Genom att hålla inne "Högerpil" och sedan trycka på Spela upp når du den sista filen eller mappen. Om du håller in "Vänsterpil" och sedan trycker på Spela upp kommer du till den första

4.1.1.2. Radering av filer och mappar i Milestone 312 Ace

I Milestone 312 Ace kan du radera filer eller mappar direkt i din spelare utan koppling till dator. Du kan göra det på följande tre sätt:

Radera en fil:

Spela upp filen du vill ta bort. Håll inne "Funk" och tryck kort på Spela upp. Filen raderas när du släpper de båda knapparna. Ett meddelande kan raderas ända upp till 10 sekunder efter att uppspelningen av meddelandet slutat.

Radera flera filer i en riktning:

För att radera alla filer i en viss riktning, Tryck trippelkombinationen "Funk", Spela upp och "Högerpil" eller "Vänsterpil". Då raderar du alla filer i den aktuella mappen i vald riktning, inklusive den fil du nyss lyssnat på. Kombinationen måste hållas intryckt i två sekunder för att verkställas. En lång signal ljuder som bekräftar att raderingen startat. När det vanliga raderingsljudet hörs när raderingen är slutförd.

Varning: Det här fungerar bara när spelaren är pausad.

Radera en mapp:

Välj den mapp du vill ta bort. Håll nere "Funk" och tryck kort på Spela upp. Fortsätt att hålla nere "Funk" och efter ca 3 sekunder, tryck åter på Spela upp för att bekräfta raderingen. Slutligen släpp "Funk". Notera att det kan ta några sekunder för att ta bort en mapp med omfattande innehåll. Under processen hörs ett tickande ljud som avslutas med raderingsljudet.

4.1.1.3. Skapa genväg till en mappar

Det kommer att vara mappar du använder oftare än andra, till exempel din mapp med inköpslistor eller din mapp med favoritmusik. Du kan alltid hitta dem med standardnavigering eller så kan du skapa egna genvägar som gör att du med en knappkombination kommer direkt till önskad mapp.

Ställ dig i den mapp du vill skapa en genväg till. När du gått in i mappen med "Funk", håll inne Välj och tryck därefter på någon av de 5 knapparna på framsidan. Håll båda två intryckta i ca 3 sekunder eller tills du hör mappnamnet läsas upp. Nu kan du gå direkt till denna mapp oavsett var du befinner dig i spelare, bara tryck och håll nere Välj och tryck sedan kort på den knapp du valt för genvägen.

Observera: Det är troligtvis så att din Milestone redan har genvägar till 5 standardmappar i det interna minnet. Följ anvisningarna ovan för att ändra genvägarna till de mappar du själv vill att de ska gå till.

4.1.1.4. Röstanmne mappar

Du kan namnge dina mappar med en egen röstanteckning i stället för att talsyntesen läser upp mappnamnet. Gå in i den mapp du vill ändra namnet på. Håll inne Spela in tills du hör ett klick, fortsätt att hålla den inne och tryck även på Funk. När rösten säger "Mapp" bekräftas att röstanteckningen startat. Läs in det nya namnet (max 5 sekunder) och släpp

sedan båda knapparna. Inspelningen avslutas med signalen hög – låg. Det nya namnet blir uppläst nästa gång du väljer mappen ifråga. Du kan byta namn på mappen hur många gånger som helst. För att ta bort ett inspelat mappnamn helt och hållet, radera filen "FOLDER.NAM" i aktuell mapp via dator.


Tips: Du kan namnge ett externt minneskort med en röstanteckning på precis samma sätt. Gå så högt i nivå som möjligt och välj externt minneskort. Följ sedan beskrivningen för hur en mapp kan namnges med rösten. Härefter kommer detta namn att läsas upp varje gång du stoppar in minneskortet i din Milestone 312.

Observera: Om en mapp har både ett skrivet och ett inläst namn kommer det röstnamngivna namnet att läsas upp.

4.1.1.5. Snabbhopp

Snabbhopp är en funktion i Audio för att snabbt navigera inom en fil. Det fungerar vid uppspelning av en fil och är särskilt användbart i stora filer. För att starta användning av snabbhopp, håll inne Välj och tryck på Spela upp och du förflyttas till mitten av aktuell fil. Så länge du håller inne Välj är du kvar i läge Snabbhopp. Genom att trycka på vänsterpil flyttas du till mitten av den första halvan (25% av filens totala längd). Om du istället trycker högerpil flyttas du till mitten av den andra halvan (75% av filens totala längd). Antar vi att du först trycker på högerpil och kommer till 75% av filen, tryck därefter vänsterpil. Då flyttas du till 62,5% (mitt emellan 50–75%) av filen. Du förflyttas alltid inom hälften av föregående val. Efter varje hopp startas uppspelningen så att du hör var du befinner dig. Om du trycker fel, återgå till mitten genom att trycka på Spela upp. Men tänk på att hela tiden hålla inne Välj, annars avslutas Snabbhopp.

Observera: Snabbhopp fungerar bara under uppspelning av en fil. Om ingenting spelas upp betyder samma knappkombination (Välj och Spela upp) en genväg till en utvald mapp som finns beskrivet i avsnittet "Skapa genvägar till favoritmappar".

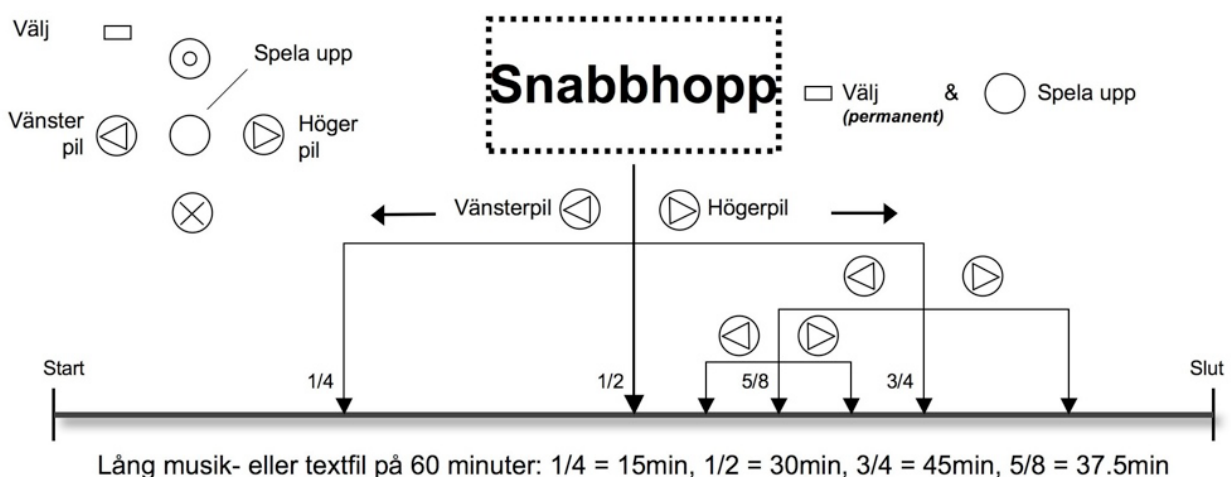

4.1.1.6. Skapa och radera Audiomärke

För att lägga in ett Audiomärke, tryck på Spela in i 2 sekunder, när du lyssnar på en fil. Milestone säger "Audiomärke inlagt" och vilket nummer den får. Det här kan du göra i vilken kompatibel fil som helst, såsom textfiler, ljudspår och radioinspelningar. För att hantera dina Audiomärken, gå till Tillgängliga inställningar. Där hittar du alla Audiomärken och du kan förflytta dig mellan de med hjälp av pilknapparna. Varje Audiomärke är numrerat, innehåller filinformation och en kort förhandsvisning av ljudet.

När du hittar det du söker efter, tryck på Spela upp eller Välj för att lämna Tillgängliga inställningar. Nu räcker det om du trycker på Spela upp för att starta uppspelningen av vald fil via Audiomärke. Totalt kan du lägga in 12 stycken. För att radera ett Audiomärke, pausa uppspelningen. Håll inne Funk och tryck sedan på Spela upp, när du släpper knapparna raderas det.

Nya Audiomärken numreras nerifrån, det vill säga 1 och uppåt. Till exempel; om du har 1-7 märken och raderar nummer 2, så får nästa nya Audiomärke första lediga nummer som är nummer 2.

4.1.2. Spela upp musik

Audio är en musikspelare av hög kvalitet som kan spela upp följande format:

Format	Beskrivning
MP3	Den absolut vanligaste komprimerade digitala ljudfilen.
AAC	Digital och komprimerad ljudfil.
WMA	Windows Media Audio: Komprimerad, digital ljudfil som används av Windows Media Player.
WAV	Digital ljudfil, mycket utrymmeskrävande.
MP4	Standardformat för multimedia som ljud och video: Filen spelas av Milestone förutom de filer i MP4 som kodats till AAC. Notera att MP4-filer behöver längre uppstartstid.
M4A	Komprimerat, digitalt ljudformat som används iTunes. (Apple Lossless stöds inte).
M4V	Digitalt videoformat från iTunes. Milestone spelar upp ljudfilen från videon. Notera dessa filer behöver längre uppstartstid.

För att lyssna på musik, tryck på Välj tills du hör Milestone säga "Audio". Välj en fil enligt beskrivningen i avsnittet "Navigera bland mappar i Audio", starta genom att trycka Spela upp. Om du vill pausa musiken, tryck på Spela upp. För att fortsätta lyssna, tryck på Spela upp igen. Med hjälp av pilknapparna flyttar du dig mellan filerna. För att snabbspola framåt, håll inne Högerpil och för att spola bakåt, håll inne Vänsterpil. Hastigheten ökar ju längre du håller inne knappen. Uppspelningen återupptas från den nya positionen när du släpper knappen.

Tips: Om du vill kan du aktivera slumpvis uppspelning av dina musikfiler. Det gör du i Tillgängliga inställningar genom att stega dig fram till alternativet "Slumpvis uppspelning" och sedan trycka Högerpil. Avsluta genom att vänta 10 sekunder eller tryck Välj. Då sparas en fil med namnet RANDOM.YES i aktuell mapp. Tryck på Spela upp för att starta uppspelning i mappen som inkluderar filen RANDOM.YES. Milestone kommer att spela upp alla filer slumpvis både i aktuell mapp och eventuella undermappar. Om du pausar uppspelningen och förflyttar dig i en mapp utan RANDOM.YES kommer uppspelningen att återgå till normalt läge.

4.1.3. Lyssna på textfil

Med hjälp av en talsyntens kan du läsa nedanstående textfiler:

Format	Beskrivning
TXT	Enkel text utan formatering (språkkod 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 eller 1256), unicodefiler stöds inte.
DOC	Standard Microsoft Office Word dokument. (DOCX stöds inte)

Audio innefattar även en kraftfull talsyntes från Acapela. Den gör att du kan läsa textfiler i TXT- och DOCformat och kan välja mellan flera språk och röster.

Observera att du först hör textfilens namn när du valt fil. Genom att trycka på Spela upp startas uppläsningen. Att öppna en doc-fil för första gången kan ta några sekunder då den konverteras. Ett tickande ljud bekräftar processen.

Att läsa texter påminner om uppspelning av musikfiler. Du kan förflytta dig mellan filer med hjälp av pilknapparna och pausa med Spela upp. För att snabbspola framåt, håll inne Högerpil och för att spola bakåt, håll inne Vänsterpil och det görs med fördefinierade intervall. Dessa intervall kan väljas genom att trycka på Spela in eller Funk under uppspelning. Du kan välja mellan "Skärmsida" (som är ungefär 25 rader), "Stycke" eller "Mening". När du håller inne en pilknapp hör du en kort dov ton och den betyder flytt inom ett intervall.

Spelaren innehåller flera språk och röster redan från början. Genom att öppna Tillgängliga inställningar kan du välja mellan dem. Gå till alternativet Språk, välj sedan språk och röst med pilknapparna. Ändringen påverkar hela spelaren så att även ledtexterna stämmer överens med valt språk.

Ännu fler språk och röster finns att välja till Milestone 312 Ace. Behöver du ytterligare röst eller språk, besök supportsidan på www.bones.ch.

Observera: När du ändrar läshastigheten i en textfil sparas det värdet i M312A. Nästa gång du läser en textfil väljs automatiskt den hastighet du sparade. Du kan justera läshastigheten vid uppspelning av textfil som det finns beskrivet i avsnittet "Läshastighet" eller via Tillgängliga inställningar.

4.1.4. Fickminnet

Audio innehåller även ett fickminne så att du kan göra egna röstinspelningar via den inbyggda mikrofonen. Det kan du använda för att göra inköpslistor, minnesanteckningar, intervjuer, adresser och telefonnummer med mera. För inspelningar med än högre kvalitet, anslut en extern mikrofon. Det finns fördefinierade inspelningsinställningar för bästa möjliga resultat.

4.1.4.1. Spela in kortare röstanteckning

För att spela in en kortare röstanteckning, tryck och håll inne Spela in tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av spelaren börjar då blinka. Avsluta inspelning genom att släppa Spela in.

Tips: Genom att trycka på Spela in, kan du spela in en röstanteckning direkt från viloläge. Den sparas i mappen "Att- göra" i internminnet. Med Välj återgår du till Audio.

4.1.4.2. Spela in röstanteckning kontinuerligt

I stället för att hålla inne Spela in, kan du välja att göra en kontinuerlig inspelning. Håll inne Spela in tills du hör ett kort klick, tryck sedan på Spela upp. En signal låg-hög meddelar att

inspelning pågår och du kan släppa knapparna. För att avsluta inspelningen, tryck en gång på Spela in. Spelaren bekräftar avslutad inspelning genom signalen hög-låg. Om du vill göra en kort paus i inspelningen, tryck på Spela upp. Tryck på samma knapp igen för att återuppta inspelningen.

4.1.4.3. Sparade röstanteckningar

Din Milestone 312 Ace sparar röstanteckningar på aktuell plats i din mappstruktur, antingen i det interna minnet eller på SD-minneskortet.

Försäkra dig om att du valt rätt mapp för den röstanteckningen du vill spara. Gå in i den med Funk och signalen hög-låg bekräftar valet av mapp. Notera att inspelningen som görs med Milestone får namnet "M_0001.MP3". Du kan infoga en ny inspelning mellan två befintliga röstanteckningar. Det gör att Milestone döper om filerna i nummerordning. Om du däremot sparar en röstanteckning i en mapp med olika filtyper sparas den i alfabetisk ordning. Observera även att Milestone spelar upp röstanteckningar annorlunda än andra filer. Efter uppspelning av en musik- eller textfil fortsätter uppspelningen av nästa fil automatiskt. När du lyssnar på en röstanteckning så avstannar uppspelningen efter meddelandet.

Tips: I Audio har du möjlighet att skapa genvägar till fem mappar. Dessa mappar kan du gå direkt till oavsett var du befinner dig i Audio. Du kan läsa mer om det i avsnittet "Skapa genvägar till favoritmappar".

4.1.4.4. Spela upp en röstanteckning

För att lyssna på en röstanteckning, tryck på Spela upp efter avslutad inspelning. Om du har flera röstanteckningar, använd pilknapparna för att välja rätt inspelning.

4.1.4.5. Inspelning via den inbyggda mikrofonen

Som standard används den inbyggda mikrofonen under inspelning. Den är optimerad för röstanteckningar och filtrerar bort bakgrundsljud. Så du kan till och med göra inspelningar i en buss, bil eller flygplan. För bästa inspelningsresultat, prata normalt och håll spelaren cirka 10 cm från munnen. Den inbyggda mikrofonen sitter i det övre vänstra hörnet, nära den röda signallampan. Dessa inspelningar sparas i mp3.format och en kvalitet på 128 kbps.

4.1.4.6. Inspelning via extern mikrofon eller linjeingång

Om du ansluter en extern mikrofon eller en ljudkabel, som det beskrivs i avsnittet "Extern mikrofon och linjeingång", växlar Milestone automatiskt över från inspelning via inbyggd mikrofon till extern inspelning. Tillvägagångssättet är detsamma som inspelning med inbyggd mikrofon, men kvaliteten ökar och du får fler valmöjligheter.

Så snart en extern mikrofon eller ljudkabel är ansluten får du fler alternativ att välja på i Tillgängliga inställningar. Innan du startar inspelning, se till att rätt inställningar är valda beroende på inspelningskälla. De är följande:

- Inspelningskälla: extern mikrofon eller linjeingång
- Inspelningsmiljö, konferens, utomhus, studio eller egen konfiguration
- Inspelningskvalitet: mp3 128–320 kilobits per sekund (kbps)
- Kanal: stereo eller mono
- Inspelningsvolym: automatisk eller mellan 10–100 procent.
- Brusfiler: av eller på

Välj de egenskaper som bäst passar inspelningstillfället.

Val av inspelningskälla är viktig. Din M312 Ace känner skillnad mellan extern mikrofon och linjeingång. Men om du t ex ansluter en radio, CD-, DVD-spelare eller en dators ljudkort och har extern mikrofon vald i stället för linjeingång, kan spelaren skadas (i sällsynta fall).

För ytterligare val, gå ner i listan Tillgängliga inställningar. I Inspelningsmiljö kan du välja något av de fördefinierade förslagen eller en av de tre profiler du själv kan konfigurera. Anpassningar för "Inspelningskvalitet", "Kanaler", "Inspelningsvolym" och "Brusfilter", väljs manuellt. I de fördefinierade alternativen, till exempel för "Studio", är dessa inställningar redan gjorda.

Tips: Brusfilter dämpar bakgrundsljud och möjliggör inspelningar i bussar och tåg, tack vare ett "highpass" filter på 100 Hertz.

Tips: Externa inspelningar kan övervakas med hjälp av hörlurar under inspelningens gång.

Varning: Ändra inte inspelningskälla om en extern mikrofon används. Inställningen ger anslutning med 2 volt och kan skada enheter som inte klarar ytterligare strömförsörjning.

4.1.5. Radiosändning - skicka trådlöst till en vanlig radiomottagare

En av de mest intressanta nyheterna i din Milestone 312 är möjligheten att sända tal- eller musik via VHF till en hem- eller bilradiomottagare. Inom ett avstånd upp till 10 meter från en vanlig radio kan din Milestone 312 Ace återge material i via radion med hög ljudkvalitet.

Radiosändning aktiveras från menyn "Tillgängliga inställningar" i egenskaperna Audio, Böcker och Radio. När lämpligt menyval skett aktiveras funktionen Radiosändning med högerpilen och avaktiveras med vänsterpilen. Överföringsfrekvensen kan höjas genom att trycka på höger pil. Frekvensen stegas i små steg successivt tills den når 108 mHz alternativt går ned till 87,5mHz. För att avsluta sändning trycker du på vänster pil.

För att sända effektivt behövs en antenn. Det löser du genom att ansluta en hörlur till hörlursuttaget och ser till att sladden hålls så rakt som möjligt. Ljudet hörs samtidigt från de inbyggda högtalarna. Undvik flätade eller spiralsladdar.

Radiosändning är fortfarande aktiv när din Milestone 312 Ace slås på nästa gång. Den valda frekvensen sparas i filen CONFIG MILESTONE.TXT. Om du byter till egenskapen Radio,

4.1.6. Lista över genvägar i Audio

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Uppspelning / paus	"Spela upp"	-
Gå till nästa fil eller mapp	"Högerpil"	-
Gå till föregående fil eller mapp	"Vänsterpil"	-
Gå ner i nivå, in i mapp	"Funk"	Signal "hög-låg"
Gå upp i nivå, lämna mapp	"Spela in"	Signal "låg- hög"
Snabbspolning framåt	"Högerpil" (håll intryckt)	-
Spola bakåt	"Vänsterpil" (håll intryckt)	-
Hoppa till sista filen	"Högerpil" + "Spela upp"	-

Hoppa till första filen	“Vänsterpil” + “Spela upp”	-
Kort inspelning	“Spela in” (håll intryckt)	“Klick”
Starta kontinuerlig Inspe­ling	“Spela in” + “Spela upp”	Signal “låg- hög”
Pausa / återuppta en kontinuerlig inspe­ling	“Spela upp” (under kontinuerlig inspe­ling)	Kort pip
Stoppa kontinuerlig inspe­ling	“Spela in”	Signal “hög-låg”
Snabbhopp	“Välj” + “Spela upp”	“Snabbhopp”
Radera aktuell fil	“Funk” + “Spela upp”	Raderingsljud
Radera alla filer i en riktning	“Funk” + “Spela upp” + “Högerpil” eller “Vänsterpil”	Beep for start of erasing and erasing sound for the end
Radera aktuell mapp	“Funk” + “Spela upp” 2ggr	Raderingsljud
Röstnamnge aktuell mapp	“Spela in” + “Funk” (håll intryckt)	“Mapp” vid inspelningsstart och avslut med signal “höglåg”
Använda genväg till mapp	“Välj” + “utvald knapp”	Namn på mapp / plats
Spara ett audiomärke	“Spela in” (håll intryckt)	“Audiomärke inlagt” och numret på Audiomärket
Radiosändning	Tillgängliga inställningar	På/av och frekvens

4.2. Böcker - Daisyspelare

Egenskapen “Böcker” läser strukturerade ljudböcker, till exempel Daisyböcker. Den stora skillnaden mellan en Daisybok och vanliga ljudböcker är förmågan att navigera mellan kapitel, sidor eller andra nivåer som den har. Det ger dig möjlighet att förflytta dig inom boken på mängd olika sätt. Följande format kan läsas av ”Böcker”:

Bokformat	Beskrivning
DAISY 2.02. (text och ljud)	DAISY står för Digitalt Anpassat InformationsSYstem. Det är ett format för digitala talböcker med omfattande navigering. Version 2.02 är den vanligast förekommande Daisyboken. Mer information om DAISY kan hittas på www.daisy.org
DAISY 3.0. (text och ljud, version 2002 & 2005)	DAISY står för Digitalt Anpassat InformationsSYstem. Det är ett format för digitala talböcker med omfattande navigering. Version 3 är det nyaste formatet. Mer information om DAISY kan hittas på www.daisy.org .
EPUB 2.0.1. (oskyddade textböcker)	EPUB eller Electronic PUBlication är en fri och öppen standard för e-böcker av International Digital Publishing Forum (IDPF). Till exempel Google EPUB böcker. Notera att endast oskyddade EPUB spelas upp av Milestone.

Audible Library. AA & AAX.	Audible.com är en populär Internetleverantör av talat ljud som nöje, information och utbildningsprogram. Mer information om böcker, såväl som prenumerationsalternativ finns på www.audible.com .
NLS Library. Krypterat DAISY 3.0 ljud	NLS står för National Library Service och är en stor leverantör av talböcker i USA.
Bookshare Library. DAISY 3.0 text	Bookshare är en leverantör av tillgängliga talböcker i USA.

4.2.1. Spela upp och pausa i en bok

Se till att du är i Böcker, dvs Milestones Daisyspelare. Tryck på Spela upp för att påbörja läsning av en talbok. Ett tickande ljud signalerar att spelaren söker efter boken. Milestone 312 Ace söker efter böcker både i det interna minnet och på SD-minneskortet. Den första bok som hittas spelas upp. För att pausa uppspelningen, tryck åter på Spela upp. För att välja mellan fler böcker, gå till Bokhyllan.

4.2.2. Navigera i en bok

Du har en mängd navigeringsalternativ, i stället för att läsa boken linjärt från pärm till pärm, de varierar något beroende på hur strukturen i boken är uppbyggd. Genom att trycka på Spela in eller Funk så får du de navigeringsmöjligheter som finns i just denna bok. Du förflyttar dig uppåt eller neråt i nivå i den rullande listan.

Vi antar att du vill gå till nivå "Fras". Här kan du förflytta dig fräs för fräs med pilknapparna. Om du trycker på Vänsterpil backar du till föregående fräs. För varje gång du trycker flyttas du ytterligare en fräs. För att gå en fräs framåt, tryck Högerpil. I alla nivåer används pilknapparna för navigering inom vald nivå.

Tänk på att navigeringsalternativen varierar från bok till bok beroende på vilken struktur som producenten valt för boken. Här följer en lista över möjliga navigationsalternativ:

Navigering	Beskrivning
Fras	Flytta fram en fräs eller gå till föregående fräs med pilknapparna. Fräs är det kortaste navigeringsalternativet och är ungefär en mening lång. Den exakta längden beror på hur boken strukturerats.
Tidshopp	Du hoppar 2 minuter i tid aningen bakåt eller framåt med hjälp av pilknapparna. Du kan anpassa tidshoppets längd i Tillgängliga inställningar (mellan 10 sekunder – 60 minuter).
Början / slutet av boken	Hoppa till början eller slutet av boken med hjälp av pilknapparna.
Bokmärken	Välj mellan tidigare sparade bokmärken med hjälp av pilknapparna.
Bokhylla	Bläddra mellan tillgängliga talböcker genom att trycka på pilknapparna. Välj bok genom att trycka på Spela upp.

Automatisk avstängning	Tryck Högerpil för att aktivera automatisk avstängning. Om du trycker på Vänsterpil stängs den av. Med automatisk avstängning, pausas Milestone 312 Ace av efter inställd tid. Om inget hänt på 10 minuter så stängs den av automatiskt. Senaste positionen sparas automatiskt.
Ställ tid för automatisk avstängning	Välj hur lång tid det ska dröja innan Milestone stängs av. Det gör du med pilknapparna.
Sidhopp	Gå till nästa eller föregående sida i boken med hjälp av pilknapparna. För att gå direkt till en sida, håll inne Välj, tryck sedan på Vänsterpil (100-tal), Spela upp (10-tal) och Högerpil (ental). Om du till exempel vill gå till sidan 223, håll inne Välj, tryck två gånger på Vänsterpil, sedan två gånger på Spela upp och sist tre gånger på Högerpil. Därefter släpp Välj för att gå till vald sida.
Första nivå (Kapitel)	Gå till nästa eller föregående rubrik eller kapitel med pilknapparna. Till exempel från kapitel ett till kapitel två.
Andra nivå	Gå till nästa eller föregående underrubrik med hjälp av pilknapparna. Till exempel från underrubrik 1.2 till underrubrik 1.3.
Tredje nivå	Gå till nästa eller föregående tredje nivåns underrubrik med hjälp av pilknapparna. Till exempel från 1.2.1 till 1.2.2.
Fjärde nivå	Gå till nästa eller föregående fjärde nivåns underrubrik med hjälp av pilknapparna. Till exempel från 1.2.1.1 till 1.2.1.2.
Fotnoter	Gå till nästa eller föregående fotnot med hjälp av pilknapparna.
Marginalanteckningar	Gå till nästa eller föregående marginalanteckning med hjälp av pilknapparna. Marginalanteckningar är text i rutor eller separata kolumner.
Producentanteckningar	Gå till nästa eller föregående producentanteckning med hjälp av pilknapparna.

4.2.3. Välj bok

Om du har flera böcker sparade på ditt SD-minneskort, kan du bläddra mellan dessa i nivå "Bokhylla". Tryck Spela in eller Funk tills du hör "Bokhylla". Välj bok med hjälp av pilknapparna. Alla titlar läses upp, vars format följer listan. Välj bok med Spela upp. Tänk på att när du väl valt bok ändras navigationsalternativet till "Frashopp".

4.2.4. Lägga in eller radera bokmärke

Tryck och håll inne Spela in i 2 sekunder för att lägga in ett bokmärke. Det bekräftas med "Bokmärke inlagt" och ett nummer för vilket bokmärke i ordningen det är. Du kan lägga in bokmärken både under uppspelningen eller i pausat läge. Bokmärken sparas direkt i boken. För att gå till ett visst bokmärke, tryck på Spela in eller Funk tills du hör "Bokmärken". Använd pilknapparna för att välja mellan de bokmärken du lagt in. Bokmärkena sparas i den ordning de ligger i boken, inte i den ordning de lades in. En fördel med det är att du väljer bokmärken i bokens naturliga läsordning.

För att radera ett valt bokmärke, pausa först uppspelningen. Tryck och håll inne Funk,

tryck sedan på Spela upp. Spelare bekräftar med "Bokmärke raderat".

4.2.5 Radiosändning - Skicka trådlöst

En av de mest intressanta nyheterna i din Milestone 312 Ace är möjligheten att sända tal- eller musik via VHF till en hem- eller bilradiomottagare. Läs mer i avsnittet 4.1.5.

4.2.6. Lista över genvägar i Daisyspelaren (Böcker)

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Spela upp / pausa	"Spela upp"	-
Gå till nästa del	"Högerpil"	-
Gå till föregående del	"Vänsterpil", inom 3 sek från uppspelningens start	-
Sätt bokmärke	"Spela in" i minst 2 sek	"Bokmärke inlagt"
Radera bokmärke	"Funk" + "Spela upp"	"Bokmärke raderat"
Radera alla bokmärken	"Funk" + "Spela upp" + "Spela in"	"Alla bokmärken raderade"
Gå uppåt en nivå	"Spela in"	Valt navigeringsalternativ
Gå nedåt en nivå	"Funk"	Valt navigeringsalternativ
Radiosändning	Tillgängliga inställningar	På/av och frekvens

4.3. Alarm

Alarm är en mycket enkel funktion. Klockan är lätt att ställa in och larmet likaså där kan du, välja en melodi eller vibration. Det finns också en timer samt ett stoppur. Eller bara att lyssna på aktuell tid och datum.

Precis som de flesta egenskaper i spelaren så är alarm uppbyggt som en lista. Med Spela in flyttar du uppåt i listan och med Funk neråt. För att ändra i en inställning, använd pilknapparna.

4.3.1. Att ställa in ett larm

Se till att först välja egenskapen Alarm. När du ställer larmet kan du välja mellan följande:

Inställning	Beskrivning
Alarm på / av	Använd pilknapparna för att sätta på alarmet. Notera att om du ändrar alarmtiden aktiveras larmet automatiskt. Tryck på Funk för att gå till nästa inställning. Det tidigare valet sparas automatiskt.
Alarm timme	Du väljer timme med pilknapparna. Med Funk kommer du till nästa inställning där du kan välja minuter.
Alarm minut	Välj rätt antal minuter med pilknapparna, vilka lags till det redan valda timtalet.

Repetition	Välj med pilknapparna mellan att ställa in ett larm för ett tillfälle, dagligt återkommande, för alla vardagar eller alla veckodagar utom söndag.
Väckningsljud	Välj mellan ett antal olika väckningsljud med pilknapparna.
Vibration	Välj att lägga till vibration, tryck på högerpil.
Stoppur	För att ta tid med stoppuret, tryck på högerpil. Trycker du ännu en gång på högerpil får du höra hur lång tid som hittills gått. Du stannar tiden med vänsterpil. För att återuppta mätningen, tryck åter på högerpil. Om du håller vänsterpil intryckt återställs tiden till noll. Stoppuret fortsätter även som M312 Ace är avstängd.
Timer (äggklocka)	Den sista inställningen är en enkel timer. Den fungerar oberoende av andra inställningar. Välj tid med pilknapparna, upp till 60 minuter. Nedräkningen börjar omedelbart. Om du vill avbryta nedräkningen, minska antalet minuter med Vänsterpil.

Om du håller inne Funk i 2 sekunder får du en summering av dina larminställningar.

4.3.2. Stänga av alarmer

För att stänga av larmljudet eller vibrationen, tryck på Spela upp.

4.3.3. För tid och datum

För att få veta hur mycket klockan är, tryck på Spela upp. Vill du även veta veckodag och dagens datum, tryck och håll inne Spela upp så läses det upp efter tidsangivelsen.

4.3.4. Ställa in tid och datum

Tid och datum ändras i menyn Grundinställningar. Dit kommer du genom att trycka och hålla inne Funk i 2 sekunder, släpp knappen när spelaren börjar läsa. Tryck på Högerpil två gånger så når du grundinställningarna. Använd Funk för att flytta nedåt, inställning för inställning. När du nått rätt parameter, timme, minut, dag, månad och år, ändra inställning med pilknapparna. Inställningarna sparas automatisk när du lämnar menyn.

4.3.5. Lista över genvägar i Alarm

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Gå mellan inställningar	“Spela in” eller “Funk”	Namn på inställning
Välj alternativ inom vald inställning	“Högerpil” eller “Vänsterpil”	Namn på inställning
För att höra tid och datum	“Spela upp” (håll intryckt)	Aktuell tid och datum
Stänga av larmet	“Spela upp”	-

5. Extrafunktioner

Detta avsnitt beskriver de extrafunktioner som kan köpas till Milestone 312 Ace. De saknas vid köp av Milestone 312 Ace i standardutförande. Vill du beställa eller aktivera en eller flera extrafunktioner, kontakta din återförsäljare.

5.1. Radio

Funktionen Radio är en FM-stereomottagare med vilken du kan gå till förprogrammerade stationer, direkt till vald frekvens, lyssna på radio samt spela in radioprogram.

Observera: Anslut hörlurar för att använda Radio. Dess kablar fungerar som antenn. Utan kabel i hörlursuttaget saknas mottagningsmöjlighet.

5.1.1. Lyssna på radio

För att söka en radiokanal, tryck kort på någon av pilknapparna. Sökningen som startar stannar automatiskt vid nästa kanal. För att finjustera frekvens, tryck helt kort på någon av pilknapparna (0,1 MHz per steg).

Tryck på Spela upp för att lyssna på radiokanalen. Om du trycker på Spela upp igen så pausas sändningen och spelare blir tyst.

Observera: I Radios menyn Tillgängliga inställningar kan du välja mellan att lyssna i mono eller stereo och justera sökningsfrekvensen. Din Milestone kan även ta emot en radiosignal från en annan enhet. Läs mer om det i avsnittet Audio.

I Radios Tillgängliga inställningar kan du växla mellan mono- och stereouppspelning samt anpassa sökkänsligheten. För att lyssna på radio med högtalare, håll inne Välj och tryck sedan på Funk. För att återgå till standard, pausa med Spela upp. Därefter tryck en sekund på Spela upp så fortsätter radiosändningen via hörlurar.

5.1.2. Sökning av kanal via frekvens

Som alternativ till sökning med pilknapparna kan du gå direkt till en viss frekvens. Tryck och håll nere Välj och mata in frekvens med knapparna Vänsterpil, Spela upp samt Högerpil i nämnd ordning. När du släpper Välj går spelaren till vald frekvens.

Vänsterpil = 80, 90 eller 100 MHz

Spela upp = ental 1-9 MHz

Högerpil = decimaler 0,1-0,9 MHz

T ex tryck och håll nere Välj, tryck 2 gånger på Vänsterpil, 9 gånger på Spela upp samt 3 gånger på Högerpil. När du släpper Välj öppnar spelaren radiokanalen med 99,3 MHz.

5.1.3. Spara och döp en radiokanal

När du lyssnar på en radiokanal du vill spara, håll nere Spela upp tills du hör ett pip. Pipet bekräftar att kanalen är sparad. Du kan spara upp till 12 kanaler. Tryck Spela in/Funk för att byta mellan redan sparade kanaler. Du kan även namnge dina sparade kanaler. Se först till att göra paus i ditt lyssnande. Samma knappkombination används som när du röstnamnger en mapp i Audio. Dvs tryck och håll nere först Spela in och sedan Funk, håll båda knappar intryckta. Spelare säger det nuvarande numret på radiokanalen. Ett klick hörs och då startar inspelningen. Läs in ditt meddelande, t ex "kanal P4" (max 5 sekunder). Den

avslutas när du släpper båda knapparna och det bekräftas av signalen ”hög-låg”. Nästa gång du väljer radiokanalen hörs ditt inspelade namn.

5.1.4. Spela in radioprogram

Använd samma knappkombination som vid kontinuerlig inspelning av röstanteckning. Dvs tryck och håll inne Spela in och tryck Spela upp. Du hör en signal och lampan blinkar när du spelar in. När du vill avsluta inspelningen, tryck på Spela in. Inspe­lingen sparas i mp3-format med 128 kbps. Alla program du spelar in sparas i en mapp som Milestone skapar automatiskt. Den heter helt enkelt Radio och finns på det interna minnet.

5.1.5. Radiosändning

Läs mer i avsnittet 4.1.5 Radiosändning – skicka trådlöst.

5.1.6. Lista över genvägar i Radio

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Uppspelning / paus	”Spela upp”	-
Sök: Gå mellan radiokanaler	”Höger-” eller ”Vänsterpil” i 1 sekund	-
Finjustering i 0,1 MHz/steg	”Högerpil” eller ”Vänsterpil”	-
Spara frekvens	”Spela upp” i 2 sekunder	Kort pip
Gå mellan sparade kanaler	”Spela in” eller ”Funk”	Nummer / röstmeddelande
Röstnamnge aktuell sparad kanal	”Spela in” + ”Funk” (håll intryckta)	Startar med nuvarande nr följt av ett klick och slutar med signalen ”hög-låg”
Gå direkt till frekvens	Håll inne ”Välj” i kombination med ”Vänsterpil”, ”Spela upp”, ”Högerpil	Vald frekvens meddelas
Spela in radioprogram	Starta med ”Spela in” + ”Spela upp” och stoppa med ”Spela in” igen	Startar med en signal ”låg-hög” och slutar med ”hög-låg”

5.2. Agenda

Agenda är en effektiv möteskalender för att hjälpa dig organisera ditt dagliga liv, att lägga in mötestider, skapa aktiviteter som M312 Ace uppmärksammar dig på. T ex att väckas på morgonen med musik, planera att spela in ett radioprogram längre fram i veckan eller att spela upp en röstanteckning vid ett särskilt tillfälle.

När du går till Agenda med Välj-knappen läser M312 Ace automatiskt upp dagens datum. Vill du byta dag, använd pilknapparna.

Agendan bygger på samma struktur som Böcker och Alarm, dvs som en vertikal lista där du navigerar med Spela in och Funk. För att lyssna inom respektive inställning, använd pilknapparna. Med Spela upp kan du få en summering av dina inställningar, lägga in ett möte

eller skapa en aktivitet. Vi beskriver hur du lägger in en aktivitet såsom en bekants födelsedag i slutet på detta kapitel.

5.2.1. Information om aktuell dag och tid

Innan du skapar en ny aktivitet, är det bra att kolla så att aktuell dag och klockslag är korrekt. Tryck på "Funk" i 2 sekunder så läses Informationslistan upp. Du får veta veckodag, datum, tid och vecka. Avsluta genom att trycka på "Välj".

5.2.2. Att skapa och hantera aktiviteter

Följande inställningar och dess parametrar hjälper dig att organisera dina aktiviteter. Efter de åtta olika valmöjligheterna kommer två varianter av hur du kan lista dina aktiviteter. Med det sista alternativet kan du stänga av påminnelse. Använd "Spela in" och "Funk" för att välja mellan inställningarna.

Val	Beskrivning
Dag	Välj dag med pilknapparna för din aktivitet. Helt datum meddelas. För att färdigställa val av datum, gå vidare till inställning av "Månad" och "År".
Månad	Välj månad med pilknapparna för din aktivitet.
År	Välj år med pilknapparna för din aktivitet.
Timme	Välj timme med pilknapparna för din aktivitet. I nästa val ställer du in minuter avslutar aktiviteten.
Minut	Välj minut med pilknapparna, och du har slutfört din aktivitet.
Aktivitet	Välj typ av aktivitet med pilknapparna: Pipljud - En ton ljuder vid förinställd tidpunkt. Påminnelsen ljuder utan paus i 2 minuter. Spela upp röstanteckning - Spelar upp din röstanteckning vid förinställd tidpunkt och upprepas i två minuter. För denna aktivitet, skapa en röstanteckning. Håll inne Spela in, efter klicket tala in ditt meddelande. Text "Tid hos tandläkaren, kom ihåg att borsta tänderna noga". Släpp knappen när du är klar. Om du inte är nöjd med din röstanteckning, gör bara en ny. Det tidigare meddelande spelas över automatiskt. Röstanteckning utan uppspelning - Görs på samma sätt som "Spela upp röstanteckning" men att inget meddelande spelas upp vid den förinställda tidpunkten. Den här aktiviteten hörs bara när du listar dina aktiviteter, antingen efter datum eller repetition. Audiouppspelning - Spelar upp filer från en specifik mapp en gång vid förinställd tidpunkt. Agenda väljer en fil från mappen "Playback" som är en undermapp till Agenda i det interna minnet. Om det finns fler än en fil, spelas de upp i alfabetisk ordning. Radiouppspelning - Spelar upp aktuell radiofrekvens eller kanal vid förinställd tidpunkt. Agenda använder den frekvens eller kanal som är vald i egenskapen "Radio".

Val	Beskrivning
Aktivitet	Välj typ av aktivitet med pilknapparna: Radioinspelning - Startar en inspelning från aktuell radiofrekvens eller kanal vid förinställd tidpunkt. M312 Ace spelar in från den frekvens eller kanal som är vald i radio. Inspelelingen sparas som en mp3-fil i mappen "Radio" i det interna minnet. Mikrofoninspelning - Startar en inspelning via inbyggd eller extern mikrofon. Inspelelingen sparas som en mp3-fil i mappen "Records" som är en undermapp till Agenda i det interna minnet.
Repetition	Välj mellan "Unik", "Dagligen", "Veckovis", "Månatlig" och "Årlig". Om du väljer "Unik" förekommer aktiviteten endast en gång. Om du väljer "Årligen" förekommer aktiviteten en gång per år, som en födelsedag till exempel.
Varaktighet	Välj tidsintervall för din aktivitet med pilknapparna. För aktiviteter som "Pipljud", "Spela upp röstanteckning" och "Röstanteckning utan uppspelning" kan du lägga till information om varaktighet i "Lista efter datum" och "Lista efter repetition". Så om ett möte håller på i 50 minuter kan du lägga till den informationen. Aktiviteter med utförande egenskaper som "Audiouppspelning", "Radiouppspelning", "Radioinspelning" och "Mikrofoninspelning" kan du begränsa varaktigheten på. Till exempel för en Radioinspelning på 45 minuter kan du välja en varaktighet på 45 minuter.
Lista efter datum	"Lista efter datum" ger dig en överblick över alla aktiviteter i kronologisk ordning. Startpunkten bestämmer du genom att ställa in "Dag", "Månad", "År", "Timme" och "Minut". När du går till "Lista efter datum" hör du först dessa inställningar. Till exempel "21 juni 2011, klockan är 17". Det är din startposition. Gå till nästa aktivitet med "Högerpil". För att gå bakåt, använd "Vänsterpil".
Lista efter repetition	Notera att din inställning av repetition påverkar vilken lista du får. Om du till exempel har "Årlig" aktivitet vald får du "Lista årsaktiviteter". Byter du till "Unik" repetition får du "Lista engångsaktiviteter". Med pilknapparna listas de valda aktiviteterna.
Påminnelse	Välj "Av" om du vill vara säker på att aktiviteter med påminnelse, inspelning eller uppspelning inte stör. Det är viktigt om du till exempel sitter i ett möte eller är på bio och inte vill störa andra. Med "På" tillåter du spelaren att påminna, spela in och spela upp även när du lyssnar på en bok eller lyssnar på radio ect.

Observera: Se till att rätt tid och datum är inställda i din Milestone 312 Ace. De uppgifterna ställer du in via Meny's "Grundinställningar". Notera att när en förinställd aktivitet startar, kan Milestone 312 Ace ändra egenskap. Till exempel om aktiviteten "Radioinspelning" startar, byter Milestone från "Agenda" till "Radio". Naturligtvis förutsätter det att din spelare har egenskapen Radio aktiverad och att du har hörlurar eller högtalare anslutna eftersom de fungerar som antenn. Om du har aktiviteter som överlappar varandra får du påminnelse för var och en av dem. Det är annorlunda med aktiviteter som upp- och inspelning. Eftersom spelaren inte kan prioritera, måste du manuellt bestämma vilken aktivitet som ska utföras efter påminnelsen. Notera också att kalenderfunktionen är inaktiv när enheten är kopplad till dator.

5.2.3. Förhandsgranska och skapa en aktivitet

När du har valt inställningar för din aktivitet, tryck kort på knappen Spela upp så kan du förhandsgranska den. För att spara aktiviteten, håll inne Spela upp i någon sekund. Det spelar ingen roll var någonstans i Agenda du är, Milestone bekräftar med "Aktivitet inlagd".

5.2.4. Radera en aktivitet

Välj "Lista efter datum" eller "Lista efter repetition" och välj den aktivitet du vill radera. Du kan radera under eller efter uppspelning av aktivitet (upp till 10 sek). Håll inne Funk och tryck på Spela upp. Raderingen bekräftas med ett ljud liknande "att knyckla ihop ett papper". För att radera alla aktiviteter i Agenda, anslut Milestone 312 Ace till dator. Radera hela mappen "Events" som är en undermapp i Agenda i det interna minnet.

Tips: Notera att du i Agendans "Tillgängliga inställningar" har en funktion som raderar alla engångsaktiviteter äldre än en månad genom att tryck på "Högerpil".

5.2.5. Stoppa påminnelse

När en aktivitet startar kan du stänga av påminnelsen eller uppspelningen genom att trycka på Spela upp. En förinställd inspelning stänger du av genom att trycka på Spela in.

5.2.6. Exempel på skapande av aktiviteter

För att bli påmind om en väns födelsedag som äger rum den 5 maj, gör så här. Börja med att välja "Dag" och använd pilknapparna för att nå den femte. När du ha rätt dag, tryck Funk för att välja "Månad". Använd pilknapparna igen för att välja rätt månad, i det här fallet maj. Gå vidare med Funk.

I vanliga fall går du vidare till "År" men när det gäller födelsedagar behövs inte det. Varken "Timme" eller "Minut" behövs så fortsätt med Funk till val av aktivitet. Gå med pilknapparna och välj aktivitet "Spela upp röstanteckning". Håll inne Spela in och läs in ditt meddelande efter det klickande ljudet. Du kan till exempel säga "Min bästa kompis Micke fyller år idag". Släpp knappen när du är klar. Tryck Funk för nästa inställning "Repetition". Eftersom aktiviteten är en födelsedag vill vi välja "Årlig" vilket gör att påminnelsen återkommer varje år. Kontrollera inställningarna genom ett kort tryck på Spela upp. En förhandsvisning meddelas. Om allt är korrekt, spara aktiviteten genom att hålla inne Spela upp i någon sekund. Milestone meddelar "Aktivitet inlagd".

Notera: Påminnelser stoppas genom ett tryck på Spela upp.

5.2.7. Lista över genvägar i Agenda

Funktion	Så här gör du	Ljudmeddelande
Gå mellan inställningar	“Spela in” eller “Funk”	Namn på inställning
Välj mellan inställningens alternativ	“Högerpil” eller “Vänsterpil”	Namn på inställning
Inspelning av aktiviteterna “Spela upp röstanteckning” och “Röstanteckning utan uppspelning”	“Spela in” (håll intryckt)	“Klick”
Förhandsgranska aktivitet	“Spela upp”	Information om alla inställningar
Skapa en aktivitet	“Spela upp” i 2 sekunder	“Aktivitet inlagd”
Radera en aktivitet	“Funk” och “Spela upp”	Raderingsljud
Stoppa påminnelse	“Spela upp”	-

6. Mer information

6.1. Tekniska data

- Internt minne: 12 GB.
- Externt minneskort: SD, SDHC eller MMC minneskort, max 32 GB.
- Röstinspelningskapacitet (internt minne): 420 timmar eller 17 dagar.
- Röstinspelningskapacitet (externt minneskort): 46 dagar med 32 GB.
- Bit rate vid inspelning via inbyggda mikrofonen: 128 kbps mono.
- Bit rate vid inspelning via extern mikrofon: valbart mellan 128-320 kbps stereo.
- Samplingfrekvens vid inspelning: 44.1 kHz.
- Inspelningskvalitet: 24 bit internt, tal och lagring 16 bit (CD-kvalitet).
- Bit rate vid uppspelning: 8 kbps till 320 kbps, eller VBR (Variabel Bit Rate).
- USB 2.0 Hi-Speed
- Hörlursuttag: standard 3,5 mm, impedans 16-32 ohm.
- Linjeingång för extern mikrofon: 3,5 mm.
- Skal av stöttålig plast.
- Mått: 85 x 54 x 14 mm.
- Vikt: 53 gram.
- Inbyggt laddningsbart lithium-polymerbatteri.
- Maximal speltid: Drygt 15 timmar (beroende på olika användarinställningar).
- Maximal laddningstid: 3 timmar.

6.2. Goda råd

6.2.1. SD-minneskort

6.2.1.1. Rekommenderade fabrikat för M312 Ace

Vi rekommenderar SD-kort från SanDisk, Kingston, Transcend och Toshiba som har visat sig väldigt pålitliga.

6.2.1.2. Skydda innehållet på ett SD-minneskort

Om du har viktiga filer på ett SD-minneskort, kan du använda det spärrlås för skriv- och raderingsskydd som sitter på kortets långsida. Om du försöker att spela in eller radera en fil säger Milestone "Skrivskyddat". Radering eller ändring av innehållet är inte möjlig.

6.2.2. Konfigureringsalternativ för avancerade användare

I rotkatalogen i spelarens interna minne finns filen "CONFIG MILESTONE.TXT". Med den kan du aktivera eller stänga av olika egenskaper och funktioner samt redigera avancerade inställningar. Om du till exempel ersätter "yes" med "no" efter raden "enable_device alarm", har du avaktiverat egenskapen Alarmt.

Om du raderar filen "CONFIG MILESTONE.TXT", återgår Milestone till fabriksinställningar och alla dina personliga inställningar går förlorade. Dina sparade filer, t ex röstanteckningar eller böcker påverkas inte.

6.2.3. Skydda din Milestone

Tänk på att skydda din Milestone 312 Ace mot kraftig yttre påverka, fukt och vatten. Garantin upphävs vid oaktsam hantering, mekanisk överbelastning eller öppning av enheten.

6.2.4. Skapa en säkerhetskopia

Med en säkerhetskopia sparar du innehållet från din Milestone på annat lagringsmedia. Det gör att du har kvar innehållet ifall din spelare blir stulen eller om den helt enkelt får ett tekniskt fel. Därför rekommenderas du att spara dina filer från Milestone interna minne i dator eller ett SD-minneskort för säkerhets skull.

För att spara en säkerhetskopia, anslut Milestone 312 till dator (som beskrivs i avsnittet Överföring via dator). Markera och kopiera alla mappar från det interna minnet och klistra in i t ex datorn.

6.2.5. Ingenting fungerar längre - felsökning

Ta det lugnt, det kan finnas enkla sätt att lösa ditt problem. Prova att göra följande:

Steg 1:

Är spelaren laddad? Anslut din Milestone 312 Ace med laddare till ett vägguttag och kolla att den har tillräckligt med ström. Ladda batteriet i minst en halvtimme. Tryck på Spela upp i minst en sekund. Om Milestone fortfarande är tyst, gå till steg 2.

Steg 2:

Är knapplåset på? Tryck och håll inne Funk, tryck sedan kort på Spela in. Invänta svaret. Du hör meddelande "Knapplås av" eller "Knapplås på": Fortsätt med knappkombination tills du hör "Knapplås av". Om du ändå inte hör något, gå till steg 3.

Steg 3:

Om spelaren fortfarande är tyst, kan det vara ett tekniskt fel. Tryck och håll inne samtliga fyra knappar utom Spela upp. Släpp knapparna efter några sekunder, det återställer enheten. Om problemen fortsätter, uppdatera med senaste mjukvara som efterföljande avsnitt beskriver eller kontakta din återförsäljare.

6.3. Service och support

6.3.1. Allmän information

Vänd dig i första hand till din återförsäljare för service och support. Om det är något komplicerat problem med din spelare, kommer kontakt att tas med Bones för reparation och vidare hantering. Du kan alltid besöka www.bones.ch för ytterligare information

6.3.2. Programuppdateringar

Spelaren har en mjukvara som styr de olika funktionerna. Mjukvaran är under ständig utveckling för att göra din spelare successivt bättre och än mer effektiv. Den är versionshanterad och kan enkelt uppdateras via vår hemsida. Gå in på www.irishjalpmedel.se//Milestone/content och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

6.4. Om Bones

Bones AG är ett innovativt schweiziskt beläget i Feuerthalen, Zürichs kanton. I över 10 år har Bones producerat högkvalitativa fickminnen, ljud- och Daisyspelare samt tillbehör.