

Manual till Multi Memo

Enkelt fickminne med taktila knappar



För att börja använda Multi Memo Fickminne måste du identifiera tangenterna på framsidan, två strömbrytare på baksidan och var batterierna sitter.

På framsidan sitter fem knappar varav fyra sitter i en grupp på ena sidan och en stort knapp som sitter på andra halvan.


De fyra knapparna är från ena till andra sidan;

Knappen med punkt i mitten är inspelningsknapp. Två knappar i mitten har två pilar i mitten av tangenterna pekandes till höger respektive vänster. Med dessa bläddrar du fram och tillbaka bland inspelade meddelanden. Den yttersta knappen på andra ändan har ett kryss i mitten av knappen. Med denna raderar du meddelanden.

Om du vänder på fickminnen kommer du att känna två omkopplare som sitter några centimeter ifrån varandra. Den ena är strömbrytare och den andra är uppspelningslås. I leveransläge är bägge dessa avstängda. Skjut bägge två i motsatt läge så aktiveras fickminnet.

Spela in - spela upp

- Du spelar in genom att trycka och hålla kvar **röd** knapp "Spela In" som har prick på tangenten. När inspelning sker lyser den **röda** lampan med fast sken och ett "bipp-ljud" indikerar inspelning. När inspelningen avslutas genom att släppa tangenten så hörs ett nytt "bipp-ljud" och den **röda** lampan slocknar.
- Du kan spela in max 360 sekunder (6 minuter) varav varje meddelande kan vara maximalt 60 sekunder långt.
- Du kan spela in upp till 60 meddelanden totalt.
- Du spelar upp inspelat meddelande genom att trycka på den stora **svarta** tangenten "Spela upp" med pil på knappen. Vill du stoppa en uppspelning trycker du bara på samma knapp igen.

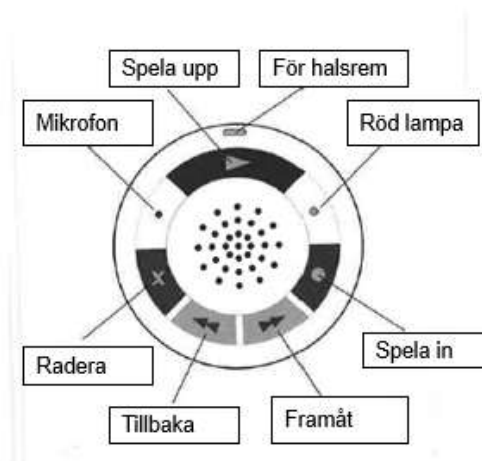

Hitta inspelat meddelande

- Du kan bläddra i dina meddelanden genom att trycka på de två **gula** knapparna med dubbelpilar höger eller vänster, dvs "Bakåt" eller "Framåt".
- Vill du komma direkt till början eller till slutet trycker du ned "Bakåt" eller "Framåt" i ca 3 sekunder.

Radera meddelanden


- Leta upp meddelandet som du vill radera genom att bläddra med knapparna "Bakåt" eller "Framåt". Tryck på den **blå** knappen med kryss på dvs "Radera". Vid aktiverad radering hör du ett "Bipp-ljud" samt att den **röda** lampan blinkar en gång.
- Radera alla meddelanden samtidigt genom att hålla inne **blå** knapp med kryss samtidigt med en **gul** bakåtknapp, vänsterpekande dubbelpilar, i ca 5 sekunder. Släpp knapparna när den röda lampan blinkar och ett "bipp-ljud" hörs när meddelandena är raderade.

Skydda inspelade meddelanden med låsfunktion

- Använd switchen på baksidan och ställ den i sitt vänstra läge - *Lock*. Då avaktiveras inspelning och radering

Strömkälla finns under en lucka på baksidan med en kryss-skruv som låser

- 1,5 volt x 3 (4,5 volt)
- Knappcell AG13/LR44 x 3

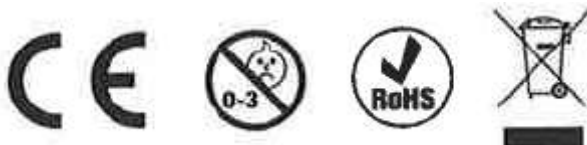

Art.nr: 55092